

Lephademodex

Toallitas limpiadoras estériles sin conservantes

Uso previsto:

LEPHADEMODEX está indicado:

- en la higiene diaria de los párpados en caso de infección por *Demodex*,
- para aliviar los síntomas de infección o inflamación del párpado causada por *Demodex*.

Demodex es el parásito microscópico de la piel más común. La infección por *Demodex* contribuye a la inflamación del párpado (blefaritis). *Demodex* no se elimina con métodos habituales de higiene diaria. La presencia de collaritos, los cuales se encuentran en la base de las pestañas, es un fuerte indicador de infección por *Demodex*.

LEPHADEMODEX elimina costras, caspa, impurezas y agentes infecciosos en párpados y pestañas. LEPHADEMODEX mejora los síntomas asociados a infección por *Demodex*, como picor, ardor, sequedad e inflamación del borde palpebral, tras su eliminación.

Reduce el enrojecimiento en el borde palpebral y la sensación de cuerpo extraño.

El hialuronato de sodio, el cual es un agente natural que hidrata la piel, suaviza y regenera la piel sensible.

LEPHADEMODEX está formulado con Terpinen-4-ol y se tolera bien ya que no contiene detergentes ni conservantes.

LEPHADEMODEX tiene una fórmula sin perfume, por lo tanto se puede experimentar un olor fresco debido a sus componentes. Desaparece en pocos minutos.

El color de la toallita (loción) puede variar. Esto es debido a los extractos naturales de las plantas y es normal.

Dosis:

Síntomas leves a moderados: Usar una vez al día, preferiblemente por la noche durante 4 semanas. Síntomas moderados a graves: Usar dos veces al día, mañana y noche durante 4 semanas. Su profesional sanitario puede modificar la posología y la duración del tratamiento según la gravedad de los síntomas.

Como en otros tratamientos similares para blefaritis, su profesional sanitario puede recomendarle también el uso simultáneo de lágrimas artificiales.

LEPHADEMODEX puede utilizarse a partir de los 18 años.

Modo de empleo:


Si utiliza lentes de contacto: debe retirarlas antes de usar LEPHADEMODEX.

Abra el sobre y despliegue la toallita.

Coloque la toallita envolviéndola en la parte superior del dedo índice.

Con el ojo cerrado, aplique con suavidad la toallita sobre los párpados y la base de las pestañas.

Efectúe un suave masaje en los párpados realizando movimientos circulares para eliminar costras, caspa o secreciones.

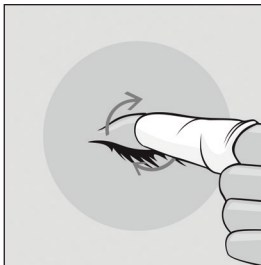

Repita la operación en el ojo contrario usando una toallita nueva.

LEPHADEMODEX es no grasa y no necesita ser aclarado después de su uso.

Mantenga el ojo cerrado durante 15 segundos después de la aplicación.

Precauciones de uso y advertencias:

Solo para uso cutáneo.

Evite introducir LEPHADEMODEX dentro del ojo, pues puede experimentar sensación de quemazón. Si esto sucede, aclarar con agua estéril o solución salina.

LEPHADEMODEX es un producto estéril, **para un solo uso**. No reutilizar, ya que su eficacia puede verse reducida y puede aumentar el riesgo de infección.

No utilice la toallita si el sobre está abierto o dañado.

No utilice el producto después de la fecha de caducidad indicada en la caja y en el sobre. La fecha de caducidad hace referencia al producto dentro del envase intacto y correctamente conservado.

Todas las toallitas deben desecharse después de su uso en la basura.

Deje de usar LEPHADEMODEX y contacte con su profesional sanitario si los síntomas empeoran o sufre alguna reacción alérgica.

Contraindicaciones:

No utilizar si tiene menos de 18 años ya que no hay datos disponibles.

No utilizar si está embarazada o en periodo de lactancia ya que no hay datos disponibles.

No utilizar si es alérgico a alguno de los componentes.

Conservar el producto entre 8 °C y 25 °C.

MANTENER FUERA DE LA VISTA Y DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Posibles efectos adversos:

Se han notificado los siguientes acontecimientos adversos: sensación de quemazón tras su uso. Si experimenta cualquier efecto adverso, contacte con su médico, oftalmólogo, farmacéutico o con el fabricante.

Descripción del producto:

Toallita estéril, impregnada con una loción.

Contenido de la loción: PEG-8, Polisorbato 80, Poloxámero 184, Terpinen-4-ol, PEG-6, glicéridos caprílicos, Macrogol 6, glicerol capril caproato, hialuronato de sodio, fosfato dipotásico, dihidrógeno fosfato de potasio, agua purificada.

Fecha de revisión las instrucciones de uso:

Diciembre de 2017



Fabricante

Laboratoires THEA

12, rue Louis Blériot

63017 Clermont-Ferrand Cedex 2

France



+8°C
+25°C

Conservar entre 8 °C y 25 °C



No reutilizar



No utilizar si el envase (sobre) está dañado

STERILE | R

Esterilización por irradiación



Consultar las instrucciones de uso



Precaución



Fecha de caducidad

LOT

Número de lote

CE 0459

Théa